

LEADING REGENERATION

Gamme complémentaire Geistlich

Optimiser la régénération osseuse

Découvrez les nouveautés 2020 !

EXACTEMENT

 inimitable.

Collecter l'os autogène à associer à Geistlich Bio-Oss®

Collecteurs stériles et prêts à l'emploi

Pour une collecte atraumatique préservant la vitalité cellulaire.

Safe Scraper® Twist

- Chambre de collecte transparente de 2,5 cc
- Extrémité coudée facilitant l'accès aux sites donneurs
- Système d'ouverture latérale de la chambre



NOUVEAU

Micross®


- Chambre de collecte transparente de 0,25 cc
- Idéal pour la collecte d'os dans la technique de tunnélisation
- Collecte facile même dans les zones étroites et difficiles d'accès



Fixer la membrane de collagène Geistlich Bio-Gide®*

Système de fixation Titan-Fix

- Pose de clous simple, sûre et rapide grâce à des instruments spécialement conçus
- Ancillaire permettant stérilisation, stockage et utilisation

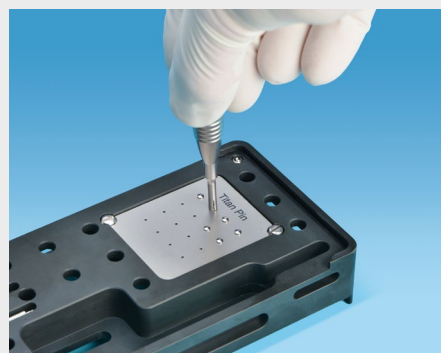

Retrait de l'applicateur par un mouvement latéral ou en utilisant une lame de scalpel dans la rainure de guidage.

* Non systématique, la fixation de la membrane améliore le pronostic thérapeutique en cas de défaut osseux important.

Stabiliser le site de la régénération


Yxoss CBR® Grille en titane sur-mesure



- Imprimée en 3D à partir des fichiers DICOM
- Adaptation plus facile, procédure plus rapide et plus sûre
- Contours doux en adéquation avec les volumes osseux naturels
- Easy Removal Design® : points de rupture prédéfinis pour faciliter la dépose
- Stabilité optimisée grâce aux appuis osseux

Options complémentaires :

- Calcul de l'augmentation de volume nécessaire pour le cas concerné
- Possibilité de prévoir la localisation des implants

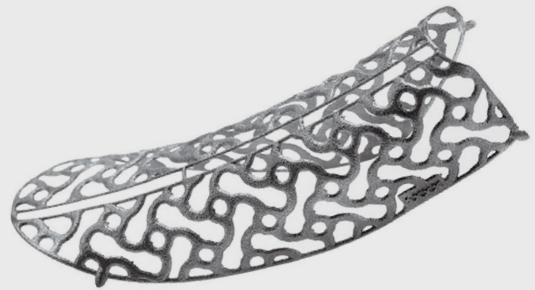

NOUVEAU

RPM™ Membrane non résorbable renforcée titane



- Macropores permettant la vascularisation et la perméabilité cellulaire vers le greffon osseux
- Renfort titane pour maintenir le volume
- Maillage en PTFE qui épouse les contours tissulaires

Formes disponibles :

- Rectangulaires à découper
- Avec points de fixation en dehors du défaut osseux
- Interproximales





Plus d'informations
www.geistlich.fr
www.shop.geistlich.fr

Fabricant

Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filiale France

Geistlich Pharma France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – 43073
95913 Roissy CDG Cedex

Fabricants Partenaires

C.G.M. S.p.A./ Divisione Medica META
Via E. Villa n°7
42124 Reggio Emilia (Italie)

Osteogenics Biomedical, Inc.
4620 71st Street, Bldg, 78-79
Lubbock, TX 79424 (USA)

Hipp Medical AG
Wilhelmstrasse 19
78600 Kolbingen (Allemagne)

Membrane de collagène

Geistlich Bio-Gide®

25 x 25 mm, 30 x 40 mm



Geistlich Bio-Gide® Compressed

20 x 30 mm



Substitut osseux

Geistlich Bio-Oss® Collagen

90% Geistlich Bio-Oss® (0,25-1 mm) + 10% de collagène


100 mg (0,2 – 0,3 cm³) | 250 mg (0,4 - 0,5 cm³)



Geistlich Bio-Oss®

Granulométrie fine (0,25-1 mm) | 0,25 g à 2 g (1 g correspond à 2,05 cm³)

Granulométrie large (1-2 mm) | 0,5 g à 2 g (1 g correspond à 3,13 cm³)

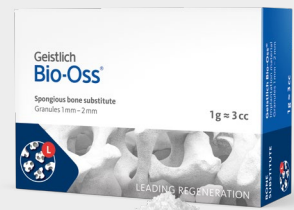

Dispositifs médicaux de classe II et III réservés aux Professionnels de Santé
Organisme certificateur TÜV CE 0123
Lire attentivement les notices avant utilisation